

BRAVDEN OBI

Zgodny z
wytycznymi
ARC, AHA
i ERC

REALISTYCZNY TRENING RESUSCYTACJI
KRAŻENIOWO-ODDECHOWEJ

Pomaga w osiągnięciu lepszych rezultatów
w przypadku zatrzymania krążenia.

Fantom CPR przedstawia dorosłego
ciemnoskórego mężczyznę o anatomicznych
cechach, w celu realistycznego treningu
wentylacji i kompresji.

- Buduje pewność siebie
- Uświadamia istotę RKO
- Utrwala umiejętności

INNOSONIAN



Brayden OBI Advanced

Wizualizacja RKO w Brayden OBI za pośrednictwem zaawansowanych wskaźników świetlnych

Trzy połączone ze sobą wskaźniki LED umieszczone w fantomie dostarczają w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat wykonywanej RKO. Zaawansowane czujniki fantomu Brayden, które w razie potrzeby można przestawić na wytyczne AHA lub ERC, wykrywają i analizują skuteczność RKO - głębokość, tempo i relaksację.

Wskaźniki LED w Brayden OBI i ich znaczenie

Wskaźniki LED odzwierciedlają skuteczność RKO, dostarczając informację zwrotną oraz umożliwiając w ten sposób natychmiastową poprawę i ćwiczenie prawidłowych technik RKO.


„Efekty świetlne pokazujące właściwe przepływy wieńcowe i mózgowe są nowością i będą skutecznym czynnikiem pomagającym w poprawie jakości uciśnień.”

prof. Douglasa Chamberlaina



Prawidłowa technika

Wskaźnik LED mózgu zaświeci się tylko w przypadku prawidłowej głębokości uciśnień, odpowiedniego tempa uciśnień i pełnej relaksacji klatki piersiowej.

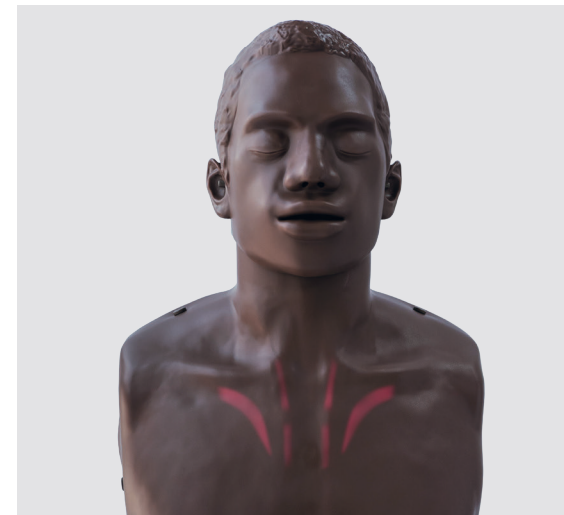

Zbyt płytkie uciśnięcia




Zbyt wolne tempo uciśnień



Zbyt szybkie tempo uciśnień


Brayden OBI Pro

Brayden OBI to nagradzana seria fantomów do nauki RKO, która wraz z aplikacją Brayden Online oferuje system szkoleniowy zaprojektowany z myślą o instruktorach i kursantach z różnymi potrzebami szkoleniowymi.

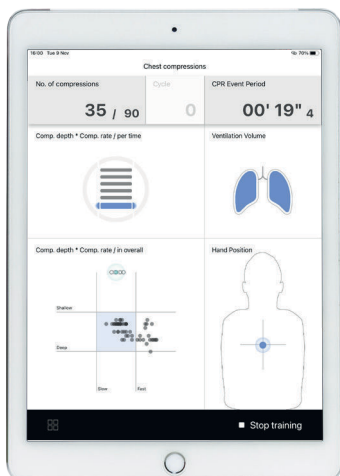

Informacje zwrotne o kluczowych parametrach RKO, pokazujące głębokość uciśnień, tempo, poziom relaksacji klatki piersiowej w określonym czasie i wielu cyklach ćwiczeń, a także objętość wentylacji i pozycję dłoni, są dostarczane w czasie rzeczywistym. Pozwala to na przegląd i analizę w/w danych w celu poprawy jakości RKO

Brayden Pro można używać wraz z aplikacją Brayden Online dostępną na IOS (iPad) i Chrome.

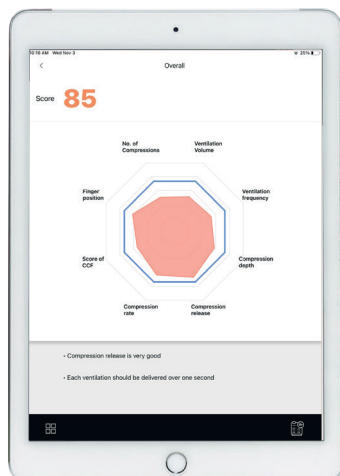

Opcja raportu, która pokazuje wiele parametrów poprzez wyświetlenie wyniku liczbowego i referencyjnego wyniku optymalnego, podkreślając parametry wymagające ulepszenia, pomaga poprawić i utrzymać na wysokim poziomie jakość wykonywania RKO.

BEZPŁATNA
APLIKACJA
INTERNETOWA
BRAYDEN

Najsukuteczniejszy sposób doskonalenia technik RKO

- Obiektywna informacja zwrotna
- Szkolenia w trybie instruktora
- Samodzielne szkolenia
- Zdalne ćwiczenia (NOWOŚĆ)
- Szkolenia spersonalizowane





*Czy wiesz że?
OBI to słowo
pochodzenia
nigeryjskiego i
oznacza „serce”.*

Zestaw do konwersji Brayden OBI

Prosty zestaw do konwersji, który zawiera skórę klatki piersiowej i twarzy osoby dorosłej, z łatwością przekształci Twoje fantomy Brayden Advanced i Brayden Pro w Brayden OBI.

Kompatybilny z fantomami Brayden IM13 i IM16.

(* podstawa fantoma jest sprzedawana oddzielnie)



Najlepsze ekonomicznie rozwiązanie do prowadzenia szkoleń zarówno w zakresie RKO dorosłych, jak i dzieci.

- **Anatomiczna budowa ciała**

Nos i usta charakterystyczne dla ciemnoskórego dorosłego mężczyzny w celu realistycznego treningu wentylacji.

- **Ekonomiczny**

Pojedynczy fantom, który można łatwo i szybko przerobić, używając wymiennych białych i czarnych skór klatki piersiowej i twarzy, co pozwala na różnorodność w programach treningowych.

- **Łatwy w użyciu podczas szkolenia AED**

Zmniejszona ilość śladów kleju na elektrodach sprawia, że trening jest bardziej przyjazny i ułatwia czyszczenie manekina.

- **Bezlateksowy i wytrzymały materiał**

- **Opracowany we współpracy ze światowymi liderami opinii**

INNOSONIAN

Innosonian, Inc.

4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu,
Seoul, 06704,
Republic of Korea

T: + 82 - 2 - 533 - 9410
E: info@innosonian.com
W: www.innosonian.global

Innosonian Europe

Unit 1, Chancerygate Way,
Farnborough, Hampshire,
GU14 8FF, UK

T: + 44 - 3333 - 445534
E: enquiries@innosonian.eu
W: www.innosonian.global

Innosonian America

5760 NC 96 Hwy,
Youngsville NC,
27596, USA

T: + 1 - 551 - 227 - 3100
E: hello@innosonian.us
W: www.innosonian.global

Dystrybuowane przez: